


# FORUM LINK net von ZEISS

Version 2.0

Nicht DICOM-fähige Geräte einfach und schnell in ein effizientes Datenmanagementsystem einbinden

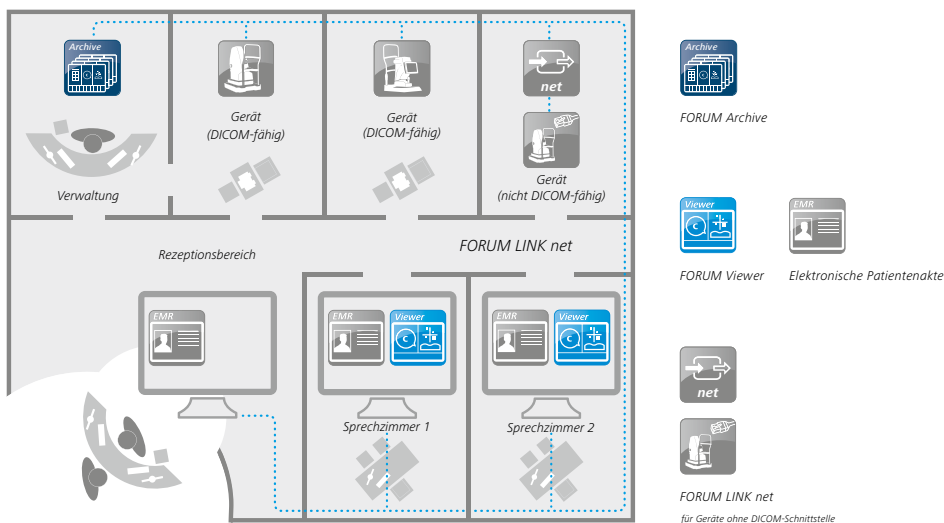

## Ihre Anforderungen

Immer mehr Augenarztpraxen gehen zur digitalen Verwaltung von diagnostischen Daten über. Der Zugang zu den Untersuchungsdaten aller Diagnosegeräte an einem Ort kann die Effizienz im Arbeitsablauf enorm steigern. Bisher ist jedoch die Integration und Dokumentation von Daten zahlreicher Diagnosegeräte ohne DICOM-Standard umständlich. Bis heute.

## Unsere FORUM-Lösung

Mit ZEISS FORUM LINK net können Geräte von ZEISS oder anderen Herstellern, die keine DICOM-Schnittstelle haben, nahtlos in den Workflow des erweiterten Datenmanagements von ZEISS FORUM integriert werden.

Mit dieser Anwendung können Bilder oder Berichte von Geräten ohne DICOM-Schnittstelle in den passenden Patientendatensatz von ZEISS FORUM übertragen und dort als DICOM-Dateien gespeichert werden. Außerdem müssen die persönlichen Daten des Patienten nicht mehr erneut eingegeben werden. Stattdessen werden sie aus den von ZEISS FORUM erstellten Worklists ausgewählt.



# FORUM LINK net von ZEISS

## Entscheidende Vorteile

### Mehr Bedienkomfort:

- Einfaches Drehen von PDF-Dateien (90° und 180°)
- Anzeige und Verarbeitung von Bildern aller gängigen Bildformate (jpg, png, tif, gif, bmp)
- Neue Benutzeroberfläche
- Möglichkeit zur Bearbeitung weiterer Parameter (z. B. AquisitionDateTime, Accession number)

### Effizienterer Arbeitsablauf durch:

- die Möglichkeit, die Augenseite individuell pro Bild oder Serie auszuwählen
- die Möglichkeit, eine Serienaufnahme manuell zu beenden und Bilder jederzeit zu senden
- Neuer Suchparameter "letzter Patient" ermöglicht das schnelle Finden des Patienten und spart Zeit
- Einfacher Anschluss von ZEISS FORUM LINK net an ZEISS FORUM über AutoConnect

## Mindestanforderungen für FORUM LINK net von ZEISS

ZEISS FORUM LINK net 2.0	
Prozessor	Intel Pentium, 1.8 GHz (oder schneller)
RAM	mind. 1 GB
Betriebssystem	Windows 7 SP1 (32 bit oder 64 bit), 8.1, 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2
Bildschirm	Super VGA 800 x 600 pixel oder höher
Weitere Zubehörteile	Tastatur und Maus
Geräteseitige Anforderungen	Netzwerkschnittstelle



*ZEISS FORUM LINK net wandelt Daten von nicht DICOM-fähigen Geräten in ein DICOM-kompatibles Format um.*

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Göschwitzer Straße 51–52  
07745 Jena  
Deutschland  
[www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)  
[www.zeiss.com/med/kontakte](http://www.zeiss.com/med/kontakte)